

MANUALE D'USO

PEDALIERA

Cod.15615075




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.3
3. DESCRIZIONE e USO DEL PRODOTTO:	pg.5
5. PULIZIA:	pg.8
6. NOTA:	pg.9
7. SMALTIMENTO:	pg.10
8. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.11
9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.12
10. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.14

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

Desideriamo ringraziarla per l'acquisto della PEDALIERA e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

La pedaliera, classificata come dispositivo medico di classe I, è conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale.

Utilizzare la pedaliera unicamente se in buono stato.

Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni



Questo simbolo indica:

utilizzare esclusivamente in posizione seduta.



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta .
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore, l'imballo è di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

3. DESCRIZIONE e USO DEL PRODOTTO:

Pedaliera in acciaio cromato, dotata di manopola di regolazione di intensità dello sforzo.

Dotata di piedini antiscivolo

Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali.

USO DEL PRODOTTO:



Consigliata per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia.

MONTAGGIO:

1. Togliere il prodotto dalla confezione.
2. Tirare le gambe in direzioni opposte fino a che i perni di blocco scattano nei relativi alloggiamenti (Fig.1) .
3. Fissare il display digitale alla mini cyclette facendo scivolare l'anello sopra al perno della regolazione della tensione. Premere delicatamente sul display per farlo aderire al telaio della mini cyclette (Fig.2) .



Attenzione: Fare aderire il display solo su questo adesivo!

PEDALIERA

4. Inserire la manopola di regolazione della tensione sul perno e serrarla ruotando in senso orario.

La manopola aumenta o diminuisce la tensione della mini cyclette.

Stringere o allentare la manopola per regolare un livello confortevole di sforzo.



Attenzione: Non stare in piedi sulla mini cyclette! Non sovraccaricare i pedali!
Rischio di danni alla mini cyclette.

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

CHIUSURA DEL DISPOSITIVO:

Per ripiegare la mini cyclette, premere il perno e richiudere la gamba verso l'interno. Ripetere l'operazione con la seconda gamba (Fig.D) .



MODALITA' D'USO:

Modalità automatica

MODALITÀ (pulsante rosso) : Questo pulsante permette di selezionare una funzione particolare. Per iniziare, premere e tenere premuto il pulsante rosso per 4 secondi. Il display LED visualizzerà le diverse funzioni (il display si spegne automaticamente in assenza di interazione) .

Per scegliere una funzione, attendere 4 secondi finché l'avvio non è completato. Premere il pulsante rosso per spostare la freccia da una funzione all'altra. Quando viene selezionata la funzione desiderata, iniziare a pedalare: il display calcolerà i progressi.

CONTEGGIO (CNT) : Indica il numero di rotazioni della mini cyclette.

DURATA (TIME) : Indica la durata di utilizzo della mini cyclette.

CALORIE (CAL) : Indica il consumo di energia espresso in calorie, utilizzando la mini cyclette.

ROTAZIONI (R.P.M.) : Indica il numero di rotazioni al minuto.

SEQUENZA (SCAN) : Visualizza in sequenza tutti i risultati delle funzioni.

Per resettare a zero il display, premere il pulsante rosso **(RESET)** per 3 secondi.

5. PULIZIA:

La pulizia e la disinfezione sono aspetti fondamentali. In generale, una pulizia regolare della pedaliera in caso di utilizzo da parte di un singolo paziente è sufficiente in termini di igiene.

Ogni volta che la pedaliera viene utilizzato da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulito e disinfettato mediante strofinamento accurato!

- **Detergere con acqua tiepida e sapone neutro.**
- **Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o spugne abrasive.**
- **Asciugare con un panno morbido e asciutto.**
- **Evitare assolutamente di utilizzare alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.**
- **Non autoclavabile.**

Disinfezione:

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante.

SOSTITUZIONE BATTERIA:



Se il display non funziona o la visualizzazione non è corretta, è necessario sostituire la batteria.

Per sostituire la batteria, far scorrere verso il basso il coperchio con dispositivo di fissaggio posizionato sul lato inferiore. Sostituire la batteria e riposizionare il display.



6. NOTA:



Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Indirizzo del Fabbricante:

SOCIETÀ □ Movi s.p.a

Indirizzo □ Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono □ 02 509051 Fax : 02 5061048

E-mail □ infowimed@movigroup.com

7. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

8. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

PEDALIERA
PEDAL EXERCISER

LOT XXXXXXXXX


REF 15615075

MD

20XX 

 **MOVI S.p.A. - Divisione Wimed**
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

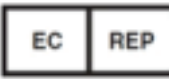

	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

PEDALIERA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

10. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005) .

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

PEDALIERA
Cod.15615075
Rev.1 11/04/2023



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano
www.movigroup.com
infotecnichewimed@movigroup.com