


MANUALE D'USO

Sedia Comoda

COMODA 3-IN-1 CON BRACCIOLI RIBALTABILI

Cod. 15651029

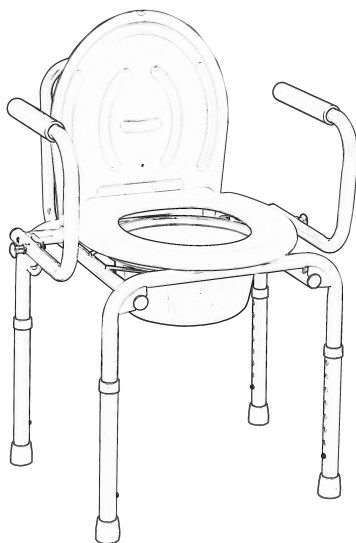


WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. DESTINAZIONE D'USO:	pg.3
3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:	pg.5
4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:	pg.8
5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:	pg.9
6. MONTAGGIO E REGOLAZIONI:	pg.10
7. PULIZIA E DISINFEZIONE:	pg.13
8. MANUTENZIONE:	pg.14
9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.15
10. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.17
11. NOTE:	pg.18
12. SMALTIMENTO:	pg.19
13. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.20
14. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.21

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per il suo acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

La Comoda 3-in-1 con braccioli ribaltabili, classificata come dispositivo medico di classe I, è realizzata in conformità al Regolamento MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 sui dispositivi medici.

Il Fabbrikante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbrikante per ricevere l'ultima versione aggiornata.

2. DESTINAZIONE D'USO:

Le Comode MOVI sono destinate a persone con difficoltà motorie e possono essere utilizzate come ausilio per l'utilizzo in bagno.

La comoda deve essere utilizzata solo a livello del suolo, su superfici stabili e facilmente accessibili e solo all'interno di edifici.



Prima di utilizzare la comoda:

- Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni al dispositivo a causa di un utilizzo errato.
- Prima del primo utilizzo, pulire e disinfettare scrupolosamente il dispositivo.
- Effettuare un controllo periodico di tutte le parti usurabili (seduta e schienale, braccioli, ecc.) e del serraggio della viteria.

- É vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Movi SpA declina qualsiasi responsabilità sui danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo o che differisca da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Il presente manuale contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere assolutamente rispettate. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono conoscere l'intero contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza riportate all'interno.

3. SIMBOLI ED AVVERTENZE GENERALI:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale. Utilizzare la comoda unicamente se in buono stato. Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali del dispositivo o all'ambiente circostante.

- Prima dell'utilizzo, l'utente deve controllare lo stato generale del dispositivo e verificarne l'integrità tramite accurata ispezione visiva.
- Qualora il dispositivo risulti non integro, non utilizzarlo e rivolgersi al proprio fornitore o a un centro di assistenza specializzato.



- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni di fornitura e non può essere modificato in alcun modo.
- Far controllare periodicamente lo stato del dispositivo e di tutti i suoi componenti da un centro tecnico autorizzato. Se si dovessero riscontrare

segni di usura, deterioramento o rottura, non utilizzare il dispositivo.

- Contattare un centro tecnico autorizzato per eventuali riparazioni.
- Accertarsi che nessuna parte del corpo (ad es. dita) né indumenti, coperte ecc. vengano intrappolati nelle parti mobili del dispositivo: **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Non utilizzare la comoda su superfici sconnesse o pendenze.
- Utilizzare con estrema cautela su superfici bagnate e scivolose.
- In caso di utilizzo da parte di pazienti diversi, è necessario prendere opportune precauzioni per evitare il verificarsi di infezioni incrociate.
- Pulire sempre il dispositivo dopo ogni utilizzo, prestando particolare cura alle parti che vengono in contatto con l'utilizzatore, come ad esempio la seduta.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dalla destinazione d'uso prevista.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la comoda sia posizionata su una superficie piana e sia perfettamente stabile.
- Poiché i rivestimenti non sono ignifughi, tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, in particolare dalle sigarette accese.
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a tempo indeterminato a condizione che sia mantenuto integro e che non siano presenti segni di usura eccessiva nei componenti.
- La comoda deve sempre essere utilizzata con l'aiuto di un assistente.
- Non salire in piedi sulla comoda.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai i braccioli per alzare o spostare la comoda.
- **Il carico massimo di sicuro utilizzo è di kg 100. Non superare mai tale carico.**

Avvertenze sulla sicurezza per OPERATORI SANITARI

- Prima del primo utilizzo del dispositivo, informare l'utilizzatore riguardo a come utilizzare in sicurezza il dispositivo, seguendo attentamente le istruzioni riportate in questo manuale che deve essere fornito insieme a esso. Informare tutti gli utilizzatori su ogni possibile pericolo a causa di un utilizzo errato.
- Le comode sono classificate come dispositivi medici di Classe I. È necessario assolvere i propri doveri in conformità alle normative vigenti in materia di installazione e utilizzo dei dispositivi medici, al fine di assicurare un utilizzo duraturo e in sicurezza di questo prodotto senza alcun rischio per pazienti, utilizzatori e terze parti. In caso di utilizzo prolungato del dispositivo, è necessario eseguire controlli a cadenza regolare (si suggerisce almeno una volta all'anno), per verificarne le funzionalità e individuare eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che questo dispositivo sia utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
- Assicurarsi che eventuali sostituti del personale siano sufficientemente istruiti sul corretto utilizzo di questo dispositivo.
- Assicurarsi che il personale rispetti le avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza per l'UTILIZZATORE

- Leggere il presente manuale prima dell'utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato e l'assenza di difetti del dispositivo.
- La comoda non deve essere considerata un sedile da usare all'interno di un autoveicolo.
- Evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale, mantenendo sempre il baricentro entro il perimetro della comoda stessa.
- Verificare il corretto montaggio delle parti removibili.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo delle Comode MOVI non è indicato a:

- Tutti coloro che non sono espressamente indicati nella Destinazione D'uso
- La comoda non deve essere utilizzata da utenti portatori di patologie che possano essere causa di stati confusionali, forti spasmi o gravi decadimenti cognitivi, a meno che non sia stata eseguita e accettata una valutazione del rischio da parte di un professionista.

COMPLICAZIONI

Non sono attualmente state individuate complicazioni derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi medici.

Qualora vi fosse il rischio di sviluppare piaghe da decubito, munirsi di strumenti di prevenzione adeguati a seguito di consulto con il medico curante.

4. CLASSIFICAZIONE - STANDARD:

Le comode MOVI sono Dispositivi Medici di Classe I, secondo il regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 (Allegato 8 - Regola 1).

I dispositivi sono conformi agli standard di prodotto attualmente in vigore.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

La Comoda 3 in 1 con braccioli ribaltabili ha la struttura in acciaio, la seduta e lo schienale sono realizzati in PVC ed è dotata di puntali antiscivolo in gomma. La seduta è regolabile in altezza da 48 a 66 cm.

I braccioli sono ribaltabili per agevolare la salita e la discesa dell'utilizzatore e per utilizzare la comoda come sedia sotto tavoli o scrivanie.

Il dispositivo può essere utilizzato in 3 modalità: sedia comoda, rialzo stabilizzante per wc e supporto per wc. I braccioli ribaltabili e lo schienale facilmente rimovibile riducono notevolmente l'ingombro.

Se le dimensioni della tazza WC di casa e le dimensioni della stanza lo permettono, la Comoda 3 in 1 può essere utilizzata anche direttamente sul WC.

Occasionalmente, la comoda può essere utilizzata anche come sedia doccia.

Attenzione! Al termine dell'utilizzo in doccia, asciugare completamente la sedia comoda in tutte le sue parti. Un prolungato contatto con l'acqua potrebbe danneggiarne la struttura.

6. MONTAGGIO E REGOLAZIONI:

Istruzioni di montaggio

Le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le presenti istruzioni per l'uso sono destinate a tutti gli utenti, in particolare al personale di assistenza, come base per un utilizzo sicuro e privo di rischi della Comoda 3-in-1. Queste istruzioni descrivono la preparazione, il funzionamento, l'uso, la manutenzione e la cura del dispositivo. Per utilizzare al meglio questo prodotto e garantire la massima sicurezza durante l'utilizzo, leggere e osservare le istruzioni per l'uso e assicurarsi che siano sempre accessibili per l'utente.

Assemblaggio

L'assemblaggio e il controllo funzionale devono essere eseguiti da personale specializzato. Il tecnico specializzato adatterà la comoda all'utente. In caso di utenti esperti, le seguenti istruzioni possono fungere da supporto per il montaggio in autonomia della comoda.

Attenzione! Leggere le istruzioni per l'uso prima di montare e utilizzare la comoda.

1. Montaggio dello schienale

- Inserire i tubolari dello schienale negli appositi spazi, spingere fino a che il pulsante non si solleva. (Fig. 1)
- Sollevare i braccioli e bloccarli con l'apposita clip.

Nota: per abbassare i braccioli premere l'apposita clip e ruotarli verso il basso.

La comoda avrà l'aspetto mostrato nella Fig. 2



Fig. 1

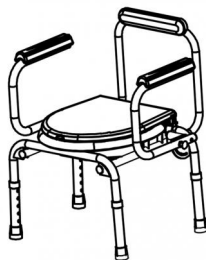


Fig. 2

2. Inserimento del secchio

- Sollevare la copertura e la seduta.
- Inserire il secchio all'interno della struttura della comoda. (Fig. 3)

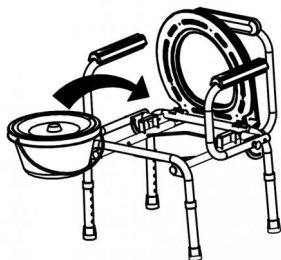


Fig. 3

3. Regolazione dell'altezza della seduta

La regolazione in altezza si effettua intervenendo sui perni presenti nei quattro tubi delle gambe:

- Con una leggera pressione spingere il perno all'interno del tubo.
- Regolare la gamba della comoda all'altezza desiderata e far fuoriuscire il perno nel foro corrispondente.
- Ripetere l'operazione per tutte e quattro le gambe.

La seduta può essere regolata a 8 differenti altezze.

Una volta raggiunta l'altezza desiderata, verificare che tutte le gambe siano regolate alla stessa altezza, che i perni siano bloccati saldamente e che la comoda sia stabile.

7. PULIZIA E DISINFEZIONE:



Ogni volta che la Comoda viene utilizzata da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulita e disinfettata con uno strofinamento accurato!

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di acqua tiepida e asciugarlo completamente con un panno asciutto e pulito.

In caso di necessità è possibile utilizzare sapone neutro e acqua tiepida.



Non utilizzare sostanze abrasive o acidi. Non utilizzare disinfettanti, detergenti a base di alcol o cloro. Sostanze aggressive possono danneggiare la comoda.

Disinfezione

Qualora si rendesse necessario disinfettare il dispositivo, si consiglia di utilizzare un detergente disinfettante delicato.

Dopo la disinfezione, assicurarsi di rimuovere completamente il detergente e di asciugare sempre correttamente il dispositivo.

8. MANUTENZIONE:

Normativa

I proprietari delle comode, in conformità con la normativa vigente, sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza dei dispositivi medici durante il loro impiego. A tal fine è necessario eseguire regolarmente interventi di controllo e manutenzione da parte di personale specializzato ed autorizzato dal fabbricante.

Come regola generale, si raccomanda di eseguire un controllo almeno una volta all'anno presso un centro autorizzato.

Nel caso risultasse necessario l'utilizzo di ricambi, fornirsi unicamente di ricambi originali

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.



In seguito a ripetute operazioni di trasporto, montaggio, smontaggio, utilizzo errato e impiego per un lungo periodo di tempo, non è da escludere che si possano verificare danni, difetti e usura. Questi problemi possono rappresentare un pericolo per la sicurezza se non vengono riconosciuti e risolti in tempo!

Se si ritiene che siano presenti danni o problemi funzionali, la comoda non deve essere assolutamente utilizzata fino a quando i componenti danneggiati non siano stati sostituiti o riparati! Per la sostituzione e la riparazione dei componenti danneggiati, contattare il fabbricante o il rivenditore autorizzato.

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

Sedia Comoda COMODA 3-IN-1 CON BRACCIOLI RIBALTABILI

9. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

COMODA 3-IN-1 CON BRACCIOLI RIBALTABILI 3-IN-1 COMMODE CHAIR WITH DROP ARMREST





15651029



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA



XXXXXXXXXX

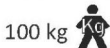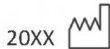

	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

Sedia Comoda COMODA 3-IN-1 CON BRACCIOLI RIBALTABILI

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

10. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice prodotto	15651029
Larghezza seduta	46 cm
Profondità seduta	44 cm
Altezza seduta	48 - 66 cm
Altezza schienale	24 cm
Larghezza totale	57 cm
Altezza totale	73 - 90 cm
Profondità totale	46 cm
Peso	6,5 Kg
Portata massima	100 kg

11. NOTE:

Si consiglia di far eseguire l'ispezione del dispositivo a un centro tecnico autorizzato, in quanto è necessaria una buona conoscenza del prodotto da ispezionare. Se tale ispezione dovesse rilevare qualsiasi difetto, malfunzionamento o segno di usura che potrebbe in qualche modo compromettere la sicurezza del dispositivo, la Comoda non deve assolutamente essere utilizzata fino alla riparazione.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:
Movi SpA — Via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

12. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

13. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

14. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005).

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano - www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Sedia Comoda COMODA 3-IN-1 CON BRACCIOLI RIBALTABILI

Cod. 15651029

Rev.0 06/11/2024



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com