

MANUALE D'USO

PEDALIERA

Cod.15605075




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI: pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA: pg.3
3. DESCRIZIONE e USO DEL PRODOTTO: pg.5
5. PULIZIA: pg.7
6. NOTA: pg.8
7. SMALTIMENTO: pg.9
8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI: pg.10
9. RECLAMI E INCIDENTI: pg.11
10. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.12

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

Desideriamo ringraziarla per l'acquisto della PEDALIERA e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono concepiti per garantire all'utente il massimo comfort e la massima sicurezza.

La pedaliera, classificata come dispositivo medico di classe I, è realizzata in conformità con il Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Assicurarsi di leggere l'intero manuale.

Utilizzare la pedaliera unicamente se in buono stato.

Le avvertenze sulla sicurezza hanno lo scopo di evitare danni alle persone.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni



Questo simbolo indica:
utilizzare esclusivamente in posizione seduta.



- Non utilizzare il dispositivo prima di avere letto attentamente il manuale d'uso.
- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta .
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore, l'imballo è di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

3. DESCRIZIONE e USO DEL PRODOTTO:

Pedaliera in acciaio cromato, dotata di manopola di regolazione di intensità dello sforzo.

Dotata di piedini antiscivolo

Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali.


USO DEL PRODOTTO:



Consigliata per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia.

MONTAGGIO:

Inserite il perno di regolazione (3) nel cilindro portapedali e ruotatelo in senso orario per intensificare il livello di resistenza, e quindi lo sforzo da produrre, e in senso antiorario per diminuirlo. Unite il blocco (2) gambe-pedali ai due piedistalli (1) con le viti in dotazione.

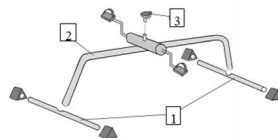

Riabilitazione arti inferiori: Sedetevi su una sedia in posizione comoda davanti alla pedaliera ed infilate i piedi nei pedali assicurandoli con fascette rivolte verso l'alto

Riabilitazione arti superiori: Per esercitare le braccia posate su tavolo stabile la pedaliera e infilate le mani nei pedali.



Attenzione: Non stare in piedi sulla mini cyclette! Non sovraccaricare i pedali!
Rischio di danni alla mini cyclette.

Movi Spa - Divisione Wimed non garantisce il funzionamento e la sicurezza del prodotto in caso di utilizzo di componenti/accessori non originali.

5. PULIZIA:

La pulizia e la disinfezione sono aspetti fondamentali. In generale, una pulizia regolare della pedaliera in caso di utilizzo da parte di un singolo paziente è sufficiente in termini di igiene.

Ogni volta che la pedaliera viene utilizzato da un nuovo paziente, deve essere obbligatoriamente pulito e disinfettato mediante strofinamento accurato!

- Detergere con acqua tiepida e sapone neutro.
- Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o spugne abrasive.
- Asciugare con un panno morbido e asciutto.
- Evitare assolutamente di utilizzare alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.
- Non autoclavabile.

Disinfezione:

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando un comune detergente disinfettante.

6. NOTA:



Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Movi S.P.A - declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un utilizzo improprio del dispositivo o da un utilizzo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Indirizzo del Fabbrikante:

SOCIETÀ □ Movi s.p.a

Indirizzo □ Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Telefono □ 02 509051 Fax : 02 5061048

E-mail □ infotecnichewimed@movigroup.com

7. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale.

La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base alla normativa vigente.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

8. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

PEDALIERA PEDAL EXERCISER

Colore Grigio/Colour Grey

REF 15605075

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 204001042

2020

100 kg



	FABBRICANTE		RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE		LOTTO
	CODICE PRODOTTO		NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
	DISPOSITIVO MEDICO		PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA		CORRENTE ALTERNATA

PEDALIERA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

9. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

10. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005).

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MANUALE D'USO ORIGINALE

PEDALIERA
Cod.15605075
Rev.2 25/01/2023



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano
www.movigroup.com
infotecnichewimed@movigroup.com