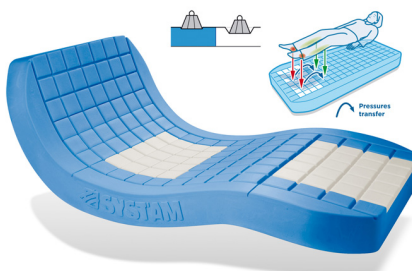


MATERASSO ANTIDECUBITO POLYMULTI VISCO CON DUE INSERTI A BASSA PRESSIONE

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

I materassi Polymulti Visco sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Prodotto in poliuretano ad alta resilienza (40 Kg/m³), anatomicamente sagomato. Area in viscoelastico di 8 cm (80 Kg/m³) nella zona sacrale e del tallone, per una maggior protezione del paziente nelle zone ad alto rischio. Presenta una sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. Perfettamente adattabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con bordi di contenimento. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Disponibile in versione Materasso Sostitutivo, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due alloggiamenti per inserti uno nella zona talloni e uno in quella sacrale. Sono disponibili inserti ad altissima densità (80 Kg/m³) a bassa pressione di contatto (inserto bianco) (LP). Inserti interscambiabili.

DESTINAZIONE D'USO

Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito. Superfici antidecubito indicate per pazienti con lesioni da pressione dal I fino al IV stadio.

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
P181MPPFDH	MATERASSO POLYMULTY VISCO Copertura POLYFILM	2611872	V080702
P181MPPMHI	MATERASSO POLYMULTY VISCO Copertura POLYMAILLE	2631835	V080702

INFORMAZIONI GENERALI



MATERASSO ANTIDECUBITO POLYMULTI VISCO CON DUE INSERTI A BASSA PRESSIONE

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédât 47300 Villeneuve sur Lot Francia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	88x199x14 cm
Peso	15,8 Kg
Portata massima	130 Kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 Kg/m ³
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 Kg/m ³
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Materiale del materasso	Fusione di poliuretano ad alta resilienza (base) con copertura in viscoelastico a memoria di forma (zona di interfaccia tra paziente e supporto).
Permeabilità della Copertura	> 500 gr/m ² /24 h
Portata Terapeutica	130 Kg



MATERASSO ANTIDECUBITO POLYMULTI VISCO CON DUE INSERTI A BASSA PRESSIONE

Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugabiancheria.
CFC	Completamente assente
Lattice	Free

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

Materiale della copertura	Polymaille traspirante e idrorepellente
Materiale della copertura elemento terapeutico	Poliestere spalmato
Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
Pulizia	Lavabile a 95°
Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
--------------------	---

ACCESSORI E RICAMBI

**MATERASSO ANTIDECUBITO POLYMULTI VISCO CON DUE INSERTI A BASSA PRESSIONE**

P161MO2 Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutive

P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm.

P452PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm