


CUSCINO ANTIDECUBITO POLYAIR HIGH

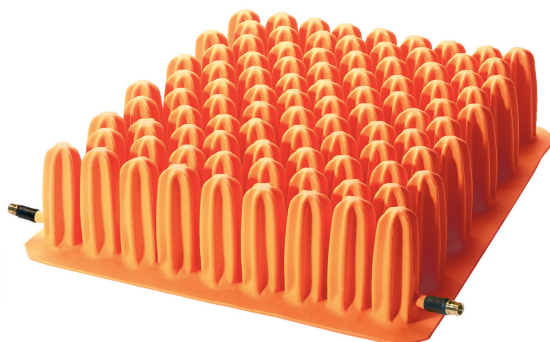

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido d'ape suddiviso in due settori (destro e sinistro) ognuno dotato di valvola laterale per il gonfiaggio tramite manometro con monopalla. Tale suddivisione dei settori d'aria (destro e sinistro) permette il gonfiaggio differenziale e il bilanciamento dello squilibrio pelvico. Un esclusivo regolo permette di combinare il peso del paziente con la circonferenza del gluteo e di individuare la pressione per il corretto gonfiaggio.

La copertura integrale in trama di poliestere con induzione di poliuretano è ipoallergenica e biestensibile, impermeabile ai liquidi, ma contemporaneamente permeabile al vapore d'acqua. Adatta per paziente con incontinenza, dotata di zip su tre lati e di base antiscivolo. Riduce le forze di taglio ed aiuta la pelle a traspirare; gli occhielli laterali permettono di inserire le valvole all'interno del cuscino dopo il gonfiaggio e facilitano il passaggio dell'aria tra l'interno e l'esterno del cuscino riducendo gli effetti della macerazione cutanea.

Indicazioni d'uso: i cuscini Polyair sono indicati in pazienti in cui è già presente una lesione da pressione (stadio I-IV) oppure in pazienti con rischio alto/molto alto di sviluppo di lesioni da pressione (scale di valutazione Norton, Braden, Waterlow). Indicato anche per pazienti con pregresse piaghe da decubito nella zona della seduta e/o pazienti con paralisi complete o incomplete del tronco o delle parti inferiori e/o con handicap o deficit sensoriali delle parti inferiori del tronco e/o deficit di stabilità frontale-laterale e/o con asimmetrie posturali o sbilanciamento pelvico.

Materiali:

Celle a nido d'ape in Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di taglio e stiramento.

Copertura integrale: Poliuretano ipoallergenico, impermeabile, traspirante, bielastico con base antiscivolo.

Altezza delle celle: 10 cm

Confezionamento: il cuscino è confezionato in scatola di cartone e preventivamente avvolto in cellophan trasparente, dotato di kit completo per la riparazione delle celle.

Disinfezione e decontaminazione: disinfettare usando prodotti spray a freddo (ammonio



CUSCINO ANTIDECUBITO POLYAIR HIGH

quaternario, glutaraldeidi ecc.)

Pulizia della copertura: lavaggio a 40°C , non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco con solventi tipo P. Asciugabiancheria a moderate temperature. Compatibile coi requisiti ospedalieri (lavabile oltre i 90°C).

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
P302C40401HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.40x40 h. 10	2462637	Y180939
P302C40431HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.40x43 h. 10	2462647	Y180939
P302C40461HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.40x46 h. 10	2462652	Y180939
P302C43431HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.43x43 h. 10	2462661	Y180939
P302C46401HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.46x40 h. 10	2462666	Y180939
P302C46461HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.46x46 h. 10	2462670	Y180939
P302C51461HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.51x46 h. 10	2462673	Y180939
P302C51501HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.51x50 h. 10	2462676	Y180939
P302C61501HW	Cuscino Polyair High Dimensioni cm.61x50 h. 10	2462682	Y180939

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia



CUSCINO ANTIDECUBITO POLYAIR HIGH

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---